

EXAMVISION™



Gratulálunk az új LED
rendszeréhez



Tartalom

Bevezetés	3
Első lépések - A lámpa első használata	
Fénykábel iránya	4
Cserélhető kábel	4
Segítség és útmutatás	4
Garancia	5
A vezérlőegység és a lámpa	
PowerBand	6
Focus™ Xtend	10
Essential One	12
Essential Alpha	16
Szimbólumok és a helyes használatra vonatkozó utasítások	18



Bevezetés

Ön egy kiváló minőségű fényrendszert választott, amelyet úgy alakítottak ki, hogy pontosan oda világítson, ahol szüksége van rá.

Az ExamVision fényrendszerei a kiválasztott fényrendszertől és fényerősségtől függően 2-24 órás üzemidővel rendelkeznek.

Világítási rendszereinket steril környezetekhez, kéz nélküli vagy érintésmentes működésre tervezték. Ahhoz, hogy optimális eredményt érjen el az új fényrendszerével, kérjük, gondosan kövesse az útmutatót és videókat - vagy kérje a helyi ExamVision kereskedő segítségét.


Első lépések - A lámpa első használata

Fénykábel iránya

Az Essential One LED kivételével, amely vezeték nélküli, a fénykábel a jobb vagy a bal oldali lencse elejéhez csatlakoztatható. Az optimális egyensúly érdekében javasoljuk, hogy a kábelt ezután a nyaka hátsó részén vezesse körbe, és az ellenkező oldalon csatlakoztassa a vezérlőegységhez.

Focus™ és Essential Nano lámpák:

A kábel irányának megváltoztatásához lazítsa meg a kis csavart, és óvatosan fordítsa a gyűrűt a kívánt pozícióba. Győződjön meg róla, hogy a gyűrű a kábelhez ér, majd húzza meg a csavart.

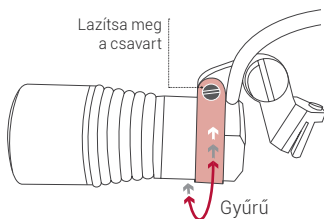

Essential Alpha lámpa:

A kábel irányának megváltoztatásához lazítsa meg a kis csavart, és óvatosan fordítsa a gyűrűt a kívánt pozícióba. Győződjön meg róla, hogy a gyűrű a kábelhez ér, majd húzza meg a csavart.

Cserélhető kábel

Focus™ és Essential Nano lámpákhoz: Ha a kábel megsérül, könnyen kicserélheti. Kérjük, forduljon a helyi ExamVision kereskedőhöz, aki gondoskodik a készülék cseréjéről.



Segítség és útmutatás

Hasznos videókért látogasson el a Szervizközpontunkba az ExamVision YouTube-csatornáján. Ha szeretné megnézni most, szkennelje be a QR-kódot. További műszaki adatokért látogasson el az examvision.com oldalra.

Garancia

PowerBand vezérlőegység / Focus™ Xtend vezérlőegység / Focus™ True & Bright és Essential Nano fényrendszer és tartozékok

3 év gyártói garancia.

Focus™ True & Bright és Essential Nano cserélhető kábel és hátlap

1 év gyártói garancia.

Essential Alpha vezérlőegység, akkumulátor, lámpa, kábel és tartozékok

1 év gyártói garancia.

Essential One

2 év gyártói garancia.

Essential One akkumulátor, töltő és tartozékok

1 év gyártói garancia.

A normál elhasználódás, a nem megfelelő használatból vagy karbantartásból eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. Meghibásodás esetén kérjük, küldje vissza javítás céljából a készüléket az ExamVision márkakereskedőjének.

Kérjük, látogasson el az examvision.com/warranty webhelyre is.



PowerBand



PowerBand használata

Jobb oldal

Érintésmentes mozgásérzékelő



A fény erősségének módosítása

Ha elhúzza a kezét az érzékelő mellett, a fény intenzitása alacsonyról magasra változik.



Kikapcsolás
Tegye a kezét az érzékelőre 3 másodpercig.

Bal oldal

Bekapcsoló gomb

Bekapcsolás

Nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot.



Működési oldalak közti váltás

A bekapcsológomb és az érintésmentes érzékelő közötti

üzemmódváltáshoz

nyomja meg gyorsan

egymás után 3-szor a

bekapcsológombot. Amikor

a lámpa VÖRÖSEN villog,

a bekapcsológomb aktív.

Amikor a lámpa ZÖLDEN

villog, a mozgásérzékelő

aktív.



A fény erősségének módosítása

Egyetlen

gombnyomással a fény

intenzitása alacsonyról

magasra változik.



Kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa

lenyomva 2 másodpercig.



PowerBand használata

Memória

Ha kikapcsolja a PowerBandet, a beállítások (fényerősség és működési mód) megmaradnak.

Működési idő

Az akkumulátor működési ideje a fényerősségtől függően változik. A legalacsonyabb beállítás akár 24 órás folyamatos használatot is biztosíthat, a legmagasabb beállítás pedig körülbelül 12 órát.



Akkumulátor állapota



100% - 20% töltött

Lámpa folyamatosan zöld



20% - 10% töltött

Lámpa folyamatosan sárga



10% - 0% töltött

Lámpa folyamatosan vörös

Akkumulátor töltöttségi szintje



10% - 0%
töltött

Lámpa vörösén villog



10% - 20%
töltött

Lámpa sárgán villog



20% - 99%
töltött

Lámpa zölden villog



100%
töltött

Folyamatosan zöld

Kérjük, vegye figyelembe: A lámpa nem kapcsolható be, amíg a PowerBand töltődik.

Lemerült akkumulátor esetén az átlagos töltési idő 2,5 óra.



Focus™ Xtend



A Focus™ Xtend használata

Bekapcsolás



Nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot. (A vezérlőegység csak akkor aktiválódik, ha a lámpa be van dugva.)

A fényerősségének módosítása



A Focus™ Xtend vezérlőegységet kéz nélkül, az előlapot pl. a könyökével megnyomva is lehet működtetni.

A panel rövid megnyomásával 3 fényerősség között válthat.


Kikapcsolás



Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig.

Működési idő

Az akkumulátor működési ideje a fényerősségtől függően változik, 6-tól 24-óra folyamatos használatot tesz lehetővé.

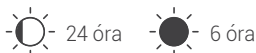

Akkumulátor töltöttségi szintje

Ha az akkumulátornak töltésre van szüksége, a töltésjelző villogni kezd.

 **Bat.** Töltés szükséges  **Bat.** Töltés  **Bat.** Feltöltve

Lemerült akkumulátor esetén az átlagos töltési idő 2,5 óra.

Essential One



Az Essential One használata

Be-/
kikapcsolás



Helyezze az akkumulátort a lámpa csatlakozófelületére. Az akkumulátor tetejének egyetlen érintésével kapcsolja be/ki a lámpát.

A fény
erősségének
módosítása




A lámpa két különböző erősségi fokozattal rendelkezik, amelyet a jobb oldalon egy gyors érintéssel szabályozhat.


Megjegyzés

Ha a lámpát az Essential One vázrésszéhez rögzíti vagy arról leveszi, csúsztassa azt be és ki a csatlakozó sínjei mentén. Győződjön meg róla, hogy ez függőlegesen és egyenesen történik, ahogy az alább a piros nyilakkal látható. A lámpa helyére illesztésekor alkalmazzon enyhe nyomást. **Eltávolításakor a hüvelykujjával közvetlenül alulról gyakoroljon nyomást. Ne csavarja vízszintesen kifelé.**

Do not twist it horizontally outwards.

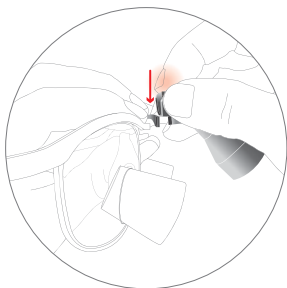

Lámpa rögzítése

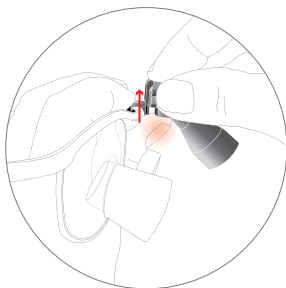

Lámpa leválasztása

Az Essential One használata

Működési idő

Az akkumulátor működési ideje a fényerősségtől függően változik, 2-től 3,5 óra folyamatos használatot tesz lehetővé.



Akkumulátor töltöttségi szintje

Ha az akkumulátor csipog, akkor töltésre van szüksége.



Csatlakoztassa a töltőpadot a töltőhöz, és helyezze az akkumulátort a töltőpadra.

Lemerült akkumulátor esetén az átlagos töltési idő 1,5 óra.

■ Töltés ■ Akkumulátor feltöltve



Essential Alpha



Az Essential Alpha használata

Be-/
kikapcsolás



A lámpa be- és kikapcsolásához forgassa el a gombot.

A fény
erősségének
módosítása



Forgassa el a gombot a fényerősség megváltoztatásához.

Működési idő

A legalacsonyabb beállítás akár 12 órás folyamatos használatot is biztosíthat, a legmagasabb beállítás pedig körülbelül 4 órát.



12 óra



4 óra

Akkumulátor állapota

A töltöttségjelző mutatja, hogy mennyi töltés van még az akkumulátorban.

■ ■ ■ ■ 25% töltve

■ ■ ■ ■ 50% töltve

■ ■ ■ ■ 75% töltve

■ ■ ■ ■ 100% töltve

Akkumulátor töltöttségi szintje

■ Töltés ■ Akkumulátor feltöltve

Szimbólumok és a helyes használatra vonatkozó utasítások



Gyártó

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Dánia.
www.examvision.com



Olvassa el a használati utasítást

Az egyéb nyelvű digitális verzióért kérjük, látogasson el az alábbi linkre: examvision.com/support



Vigyázat! Helyes használat és karbantartás

Ne módosítsa vagy változtassa meg az ExamVision terméket. Kerülje a lámpaház érintését hosszabb ideig tartó, nagy fényerősségű használat során, mivel az felmelegedhet. Ne tegye ki a terméket szélsőségesen meleg, hideg vagy nedves körülményeknek.

A LED-es eszközök nagyon erős fényel rendelkeznek, ne nézzen közvetlenül a fénybe, és ne irányítsa azt más emberek szemébe. Csak az eredeti, mellékelt töltőt használja, mivel bármely más töltő károsíthatja a terméket.

Ne zárja rövidre az ExamVision terméket.

Az optimális élettartam elérése érdekében mindig óvatosan kezelje a készülékeket.

Ne próbálja meg saját maga megjavítani az ExamVision terméket. Ha az eszköz megsérül vagy nem működik megfelelően, forduljon az ExamVision kereskedőjéhez további segítségért.

Ápolás és tisztítás

Tisztítsa meg puha ruhával, és győződjön meg arról, hogy az összes csatlakozó és csatlakozás pormentes.

Az akkumulátor gondozása

Az akkumulátort a gyártó részben feltöltötte. A legjobb gyakorlat az, ha az akkumulátor töltöttségi szintjét 30%-nál magasabban tartja. A részleges töltések nem károsítják az akkumulátort.

Akkumulátor élettartama

Amikor az akkumulátor természetes élettartama végéhez közeledik, körülbelül 500 töltés után, gyakrabban kell tölteni.

Vízállóság

Az ExamVision lámpát és a vezérlőegységet nem arra tervezték, hogy víz alá merítsék. A készülék károsodásának elkerülése érdekében azonnal törölje le a ráfröccsent folyadékokat.

Fertőtlenítés

Csak alkoholmentes fertőtlenítőszeret használjon, mint például az ExamVision fertőtlenítő kendők (kapható az ExamVision kereskedőjénél). NE használjon alkohol alapú termékeket, ultrahangos tisztítószer, autoklávot vagy más kémiai fertőtlenítőszer. Egy nedves törülőkendő rövidez zárhatja az akkumulátort, ha a törülőkendő mindkét érintkezési pontot egyszerre érinti. NE használjon olyan UV fertőtlenítési módszereket, amelyek megemelik a lencsék vagy a lámpa hőmérsékletét.

A töltő kimenete

PowerBand: DC 5V.2A.10W

Focus™ Xtend: DC 12V.1A.12W

Essential One: DC 5V.2.4A.12W

Essential Alpha: DC 5V.1A.5W



Tartsa szárazon



Az ezzel a szimbólummal jelölt berendezések közelében interferencia léphet fel



Törékeny, óvatosan kezelje



Ne dobja ki az elektronikai termékeket az általános hulladékok közé



Ne használja, ha a csomagolás sérült



 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

 linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com