

EXAMVISION™



Čestitamo vam za nakup
vašega novega sistema LED



Vsebina

Uvod	3
Začetek – prva uporaba luči	
Stran namestitve kabla lučke	4
Zamenjava kabla lučk	4
Pomoč in svetovanje	4
Garancija	5
Vaši nadzorna enota in lučka	
PowerBand	6
Focus™ Xtend	10
Essential One	12
Essential Alpha	16
Simboli in navodila za pravilno uporabo	18



Uvod

Izbrali ste visokokakovostni svetlobni sistem, ki zagotavlja ravno pravšnjo količino svetlobe natanko tam, kjer jo potrebujete.

Svetlobni sistemi ExamVision zagotavljajo od 2 do 24 ur osvetlitve, čas delovanja pa je odvisen od svetlobnega sistema ter jakosti svetlobe. Naši svetlobni sistemi so zasnovani za uporabo v sterilnih okoljih brez uporabe rok oz. dotikanja.

Če želite doseči kar najbolj izkoristiti svoj novi svetlobni sistem, pazno sledite navodilom in videoposnetkom ali pa se za pomoč obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov ExamVision.

Začetek – prva uporaba luči

Stran namestitve kabla lučke


Z izjemo lučke Essential One LED, ki je brezžična, je mogoče kabel pritrditi tako na desno kot levo ročko lupe. Za popolno uravnoteženost priporočamo, da kabel poteka okoli zatilja in se nato poveže z nadzorno enoto na nasprotni strani.

Lučke Focus™ in Essential Nano:

če želite kabel namestiti na nasprotno stran, odvijte mali vijak in obroček previdno premaknite v zelen položaj. Zagotovite, da se obroček dotika kabla, nato privijte vijak.

Lučka Essential Alpha:

če želite kabel namestiti na nasprotno stran, kabel preprosto napeljite po desni ali pa levi ročki lupe.

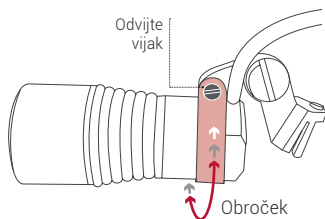

Zamenjava kabla

Llučk Focus™ in Essential Nano: če se kabel poškoduje, ga lahko enostavno zamenjate. Obrnite se na lokalnega prodajalca izdelkov ExamVision, ki bo uredil zamenjavo.



Pomoč in svetovanje

Obiščite storitveno središče na kanalu YouTube podjetja ExamVision in si oglejte koristne videoposnetke. Če si želite videoposnetke ogledati nemudoma, preprosto skenirajte kodo QR. Za več podatkov o tehničnih specifikacijah obiščite spletno mesto: examvision.com

Garancija

**Nadzorna enota PowerBand/nadzorna enota Focus™ Xtend/
svetlobna sistema Focus™ True & Bright in Essential Nano ter
dodatna oprema**

3-letna garancija proizvajalca.

**Zamenljivi kabel ter nosilna plošča Focus™ True & Bright in
Essential Nano**

1-letna garancija proizvajalca.

**Nadzorna enota Essential Alpha, baterija, lučka, kabel in dodatna
oprema**

1-letna garancija proizvajalca.

Essential One

2-letna garancija proizvajalca.

Baterija, polnilec in dodatna oprema Essential One

1-letna garancija proizvajalca.

Garancija ne krije običajne obrabe ter poškodb zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja. V primeru okvare pošljite napravo v popravilo svojemu prodajalcu izdelkov ExamVision.

Oglejte si tudi spletno mesto: examvision.com/warranty



PowerBand



Upravljanje nadzorne enote PowerBand

Desna stran Senzor gibanja brez dotika

Leva stran Gumb za vklop

Vklop

Enkrat pritisnite gumb za vklop.



Sprememba strani upravljanja

Za preklapljanje med upravljanjem gumba za vklop in senzorjem brez dotika trikrat zaporedoma hitro pritisnite gumb za vklop. Ko lučka utripa RDEČE, je aktiven gumb za vklop. Ko lučka utripa ZELENO, je aktiven senzor gibanja.



Spreminjanje jakosti svetlobe



Če roko premaknete mimo senzorja, se jakost osvetlitve spremeni s šibke na močno.

Spreminjanje jakosti osvetlitve

Z enim klikom spremenite jakost osvetlitve s šibke na močno.



Izklop

Roko 3 sekunde držite nad senzorjem.

Izklop

Pritisnite in držite 2 sekundi.



Upravljanje nadzorne enote PowerBand

Pomnilnik

Nadzorna enota PowerBand ob izklopu ohrani nastavitve (jakost osvetlitve in način upravljanja).

Čas delovanja

Čas delovanja baterije je odvisen od jakosti osvetlitve. Najšibkejša nastavitev zagotavlja do 24 ur neprekinjene uporabe, najmočnejša pa približno 12 ur.



Raven napolnjenosti baterije



100% - 20% polna
Indikator sveti
neprekinjeno zeleno



20% - 10% polna
Indikator sveti
neprekinjeno rumeno



10% - 0% polna
Indikator sveti
neprekinjeno rdeče

Polnjenje baterije



10% - 0%
polna
Indikator utripa
rdeče



10% - 20%
polna
Indikator utripa
rumeno



20% - 99%
polna
Indikator utripa
zeleno



100%
polna
Indikator sveti
neprekinjeno zeleno

Pomnite: Lučke med polnjenjem nadzorne enote PowerBand ni mogoče vključiti.

Povprečen čas polnjenja prazne baterije je 2,5 ure.



Focus™ Xtend



Upravljanje nadzorne enote Focus™ Xtend

Vklop



Enkrat pritisnite gumb za vklop.
(Nadzorna enota se ne aktivira, če lučka ni priključena.)

Spreminjanje jakosti osvetlitve



Nadzorno enoto Focus™ Xtend lahko upravljate brez uporabe rok, in sicer s pritiskom prednje plošče, npr. s komolcem.

S kratkim pritiskom plošče preklapljate med 3 jakostmi osvetlitve.


Izklop



Pritisnite in držite 2 sekundi.

Čas delovanja

Čas delovanja baterije je odvisen od jakosti osvetlitve, in sicer traja od 6 do 24 ur neprekinjene uporabe.

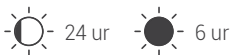

Polnjenje baterije

Ko je treba baterijo napolniti, indikator napoljenosti utripa.



Bat. Potrebno je polnjenje

Bat. Polnjenje

Bat. Napolnjeno

Povprečen čas polnjenja prazne baterije je 2,5 ure.

Essential One



Upravljanje lučke Essential One

Vklop/
izklop



Baterijski vložek postavite na priključno ploščico lučke.
Lučko vklopite/izklopite z enim dotikom vrha baterije.

Spreminjanje
jakosti
osvetlitve




Mogoča je nastavitvev dveh različnih jakosti osvetlitve, in sicer z dotikom desne strani.


Opomba

Lučko sistema Essential One na okvir namestite oz. jo z okvira snemite tako, da jo vstavite v priključek oz. jo iz njega iztaknete. Lučko namestite oz. iztaknite s popolnoma navpičnim gibom, kot prikazujeta rdeči puščici na sliki spodaj. Pri nameščanju lučke nanjo rahlo pritisnite od zgoraj.

Pri iztikanju na lučko s palcem rahlo pritisnite od spodaj. Lučke ne poskušajte izvleči v vodoravni smeri.

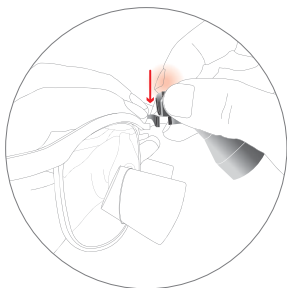

Nameščanje lučke

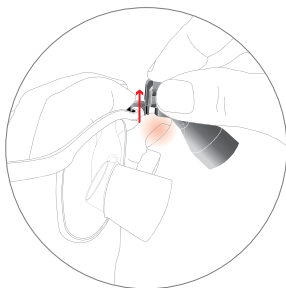


Iztikanje lučke

Upravljanje lučke Essential One

Čas delovanja

Čas delovanja baterije je odvisen od jakosti osvetlitve, in sicer traja od 2 do 3,5 ur neprekinjene uporabe.

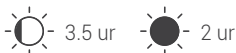

Polnjenje baterije

Ko baterija zapiska, jo je treba napolniti.



Polnilni podstavek povežite s polnilnikom in baterijo položite na polnilni podstavek.

Povprečen čas polnjenja prazne baterije je 1,5 ure.

 Polnjenje  Baterija je napolnjena



Essential Alpha



Upravljanje lučke Essential Alpha

Vklop/
izklop



Zavrtite gumb in vklopite ali izklopite lučko.

Spreminjanje
jakosti
osvetlitve



Zavrtite gumb in spremenite jakost osvetlitve.

Čas delovanja

Najšibkejša nastavitev zagotavlja do 12 ur neprekinjene uporabe, najmočnejša pa približno 4 ure.



12 ur



4 ur

Raven napolnjenosti baterije

Indikator napolnjenosti prikazuje, koliko energije je še ostalo v bateriji.

■ ■ ■ ■ 25% polna

■ ■ ■ ■ 50% polna

■ ■ ■ ■ 75% polna

■ ■ ■ ■ 100% polna

Polnjenje baterije

■ Polnjenje

■ Baterija je napolnjena

Symbols and instructions for proper use



Proizvajalec

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Danska.
www.examvision.com



Oglejte si navodila za uporabo

Za digitalne različice v različnih jezikih sledite povezavi:
examvision.com/support



Pozor. Pravilna uporaba in vzdrževanje

Izdelkov ExamVision ne spreminjajte ali prilagajajte. Med daljšo uporabo pri močni jakosti osvetlitve se ne dotikajte ohišja lučke, saj se lahko segreje. Izdelka ne izpostavljajte izjemno vročim, hladnim ali vlažnim pogojem.

Lučke LED svetijo zelo močno, zato ne glejte neposredno v svetlobo, prav tako svetlobe ne usmerjajte v oči drugih oseb. Uporabljajte samo originalni priloženi polnilnik. Drugi polnilniki lahko namreč poškodujejo izdelek.

Izdelke ExamVision zavarujte pred kratkim stikom.

Da bi zagotovili kar najdaljšo življenjsko dobo, z napravami vedno ravnajte previdno.

Izdelkov ExamVision ne poskušajte popravljati sami. Če se naprave poškodujejo ali ne delujejo pravilno, se za nadaljnjo pomoč obrnite na prodajalca izdelkov ExamVision.

Nega in čiščenje

Izdelek očistite z mehko krpo in zagotovite, da na priključkih in povezavah ni prahu.

Skrb za baterije

Proizvajalec je baterijo delno napolnil. Dobra praksa je, da je baterija napolnjena več kot 30-odstotno. Nepopolno polnjenje ne škoduje bateriji.

Življenjska doba baterije

Ko se življenjska doba baterije izteče, tj. po približno 500 polnjenjih, jo boste morali polniti pogosteje.

Vodoodpornost

Lučka ExamVision in nadzorna enota nista zasnovani za potopitev pod vodo. Če ste napravo poškropili, jo nemudoma obrišite in preprečite morebitne poškodbe.

Razkuževanje

Uporabljajte samo dezinfekcijske izdelke brez alkohola, kot so dezinfekcijski robčki ExamVision (na voljo pri vašem prodajalcu ExamVision). NE uporabljajte izdelkov na osnovi alkohola, ultrazvočnih čistilnih naprav, avtoklava ali drugega kemičnega razkuževanja. Če se z mokrim robčkom dotaknete obeh polov baterije hkrati, lahko pride do kratkega stika. Razkuževanje s svetlobo UV, ki zviša temperaturo lupe ali lučke, NI dovoljeno.

Izhod polnilnika

PowerBand: DC 5V.2A.10W

Focus™ Xtend: DC 12V.1A.12W

Essential One: DC 5V.2.4A.12W

Essential Alpha: DC 5V.1A.5W



Hraniti na suhem



V bližini opreme, označene s tem simbolom, lahko nastajajo motnje



Lomljivo, rokujte previdno



Elektronskih izdelkov ne odlagajte med gospodinjske odpadke



Če je embalaža poškodovana, izdelka ne uporabljajte



 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

 linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com