

EXAMVISION™



Čestitamo na vašem
novom LED sustavu



Sadržaj

Uvod	3
Prvi koraci - Prva uporaba vašeg svjetla	
Smjera rasvjetnog kabela	4
Zamjenjivi kabeli	4
Pomoć i vodstvo	4
Jamstvo	5
Vaša kontrolna jedinica i svjetlo	
PowerBand	6
Focus™ Xtend	10
Essential One	12
Essential Alpha	16
Simboli i upute za pravilnu uporabu	18



Uvod

Odabrali ste visokokvalitetan svjetlosni sustav, prilagođen za isporuku precizne količine osvjetljenja, upravo tamo gdje vam je potrebno. ExamVision svjetlosni sustavi imaju vrijeme rada od 2 do 24 sata, ovisno o odabranom sustavu i intenzitetu rasvjete.

Naši svjetlosni sustavi dizajnirani za rad bez ruku ili dodira za sterilna okruženja.

Za postizanje optimalnih rezultata s vašim novim svjetlosnim sustavom molimo da precizno pratite upute i video snimke - ili zatražite pomoć od vašeg ExamVision distributera.


Prvi koraci - Prva uporaba vašeg svjetla

Smjera rasvjetnog kabela

Osim Essential One LED svjetla, koje je bežično, rasvjetni kabel pričvršćuje se na desnu ili lijevu stranu vaše lupe. Za optimalnu ravnotežu preporučamo kabel koji prati liniju stražnje strane vašeg vrata, a pričvršćuje se na kontrolnu jedinicu na suprotnoj strani.

Focus™ i Essential Nano svjetla:

Za promjenu smjera kabela olabavite vijak i nježno okrenite prsten na željeni položaj. Pobrinite se da prsten dodiruje kabel i zatim zategnite vijak.

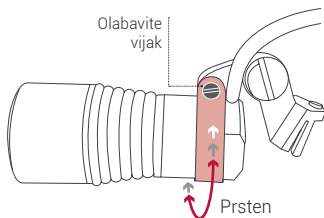

Essential Alpha svjetlo:

Za promjenu smjera kabela jednostavno usmjerite kabel na lijevu ili desnu stranu lupe.

Zamjenjivi kabeli Focus™ i Essential Nano svjetla:

Ako je vaš kabel oštećen, možete ga veoma jednostavno zamijeniti. Molimo da kontaktirate vašeg ExamVision distributera koji će dogovoriti zamjenu.



Pomoć i vodstvo

Posjetite naš servisni centar na ExamVision YouTube kanalu gdje se nalaze korisne video snimke. Skenirajte QR kod i odmah započnite s gledanjem. Za dodatne tehničke specifikacije posjetite examvision.com

Jamstvo

**PowerBand kontrolna jedinica/Focus™ Xtend kontrolna jedinica/
Focus™ True & Bright i Essential Nano svjetlosni sustav i dodaci**
Obuhvaćeno trogodišnjim jamstvom proizvođača.

**Focus™ True & Bright i Essential Nano zamjenjivi kablovi i noseća
pločica**
Obuhvaćeno jednogodišnjim jamstvom proizvođača.

Essential Alpha kontrolna jedinica, baterija, svjetlo, kabel i dodaci
Obuhvaćeno jednogodišnjim jamstvom proizvođača.

Essential One
Obuhvaćeno dvogodišnjim jamstvom proizvođača.

Essential One baterija, punjač i dodaci
Obuhvaćeno jednogodišnjim jamstvom proizvođača.

Uobičajeno habanje i trošenje, oštećenje zbog nepravilne uporabe ili održavanja nije obuhvaćeno jamstvom. U slučaju kvara, molimo vratite uređaj vašem ExamVision distributeru zbog popravka.

Molimo da posjetite: examvision.com/warranty



PowerBand



Upravljanje vašom PowerBand jedinicom

Desna strana Senzor pokreta bez dodira

Lijeva strana Gumb za napajanje

Uključivanje

Jednom pritisnite gumb za napajanje.



Prebacivanje između radnih strana

Za prebacivanje radnog načina od gumba za napajanje na senzor bez dodira brzo pritisnite gumb za napajanje tri puta. Kada svjetlo treperi CRVENO, aktivan je gumb za napajanje. Kada svjetlo treperi ZELENO, aktivan je senzor pokreta.



Mijenjanje intenziteta svjetla

Pomicanje vaše ruke u blizini senzora promijenit će intenzitet svjetla od niskog na visoki.

Mijenjanje intenziteta svjetla

Jednim klikom promijenit ćete intenzitet svjetla od niskog na visoki.



Isključivanje

Držite ruku iznad senzora 3 sekunde.

Stingere

Pritisnite i držite 2 sekunde.



Upravljanje vašom PowerBand jedinicom

Memorija

Kada isključite PowerBand jedinicu, ona će zapamtiti postavke (intenzitet svjetla i radni način).

Vrijeme rada

Vrijeme rada vaših baterija ovisi o intenzitetu svjetla. Najniže postavke omogućuju do 24 sata neprekidne uporabe, a najviše postavke približno 12 sati.



Status razine baterije



100% - 20% napunjeno
Svjetlo neprekidno zeleno



20% - 10% napunjeno
Svjetlo neprekidno žuto



10% - 0% napunjeno
Svjetlo neprekidno crveno

Status punjenja baterije



10% - 0%
napunjen

Svjetlo treperi crveno



10% - 20%
napunjen

Svjetlo treperi žuto



20% - 99%
napunjen

Svjetlo treperi zeleno



100%
napunjen

Neprekidno zeleno

Uzmite u obzir: Jedinica lampice ne može se uključiti dok se PowerBand puni.

Prosječno vrijeme punjenja prazne baterije je 2.5 sati.



Focus™ Xtend



Upravljanje vašom Focus™ Xtend jedinicom

Uključivanje



Jednom pritisnite gumb za napajanje. (Kontrolna jedinica neće se aktivirati, osim ako je priključena jedinica lampice).

Mijenjanje intenziteta svjetla



Focus™ Xtend kontrolnom jedinicom moguće je upravljati bez ruku, pritiskom na prednju ploču, npr. pomoću lakta.

Kratki pritisak na ploču može promijeniti 3 razine intenziteta svjetla.

Isključivanje



Pritisnite i držite 2 sekunde.

Vrijeme rada

Vrijeme rada vaše baterije ovisi o intenzitetu svjetla, od 6 do 24 sata neprekidne uporabe.



24 sati



6 sati

Status punjenja baterije

Kada je potrebno napuniti bateriju indikator punjenja će zatreperiti.



Bat. Potrebno je punjenje



Bat. Punjenje



Bat. Napunjeno

Prosječno vrijeme punjenja prazne baterije je 2.5 sati.

Essential One



Upravljanje vašom Essential One jedinicom

**Uključivanje/
isključivanje**



Postavite paket s baterijama na spojnu ploču svjetla. Uključite/isključite svjetlo jednim dodiranjem vrha baterije.

**Mijenjanje
intenziteta
svjetla**




Vaše svjetlo ima dva različita intenziteta kojima upravljate brzim dodiranjem desne strane.


Napomena

Dok spajate ili odspajate glavno svjetlo s okvira Essential One jedinice, povucite lampicu duž vodilica priključka. Pobrinite se da je to učinjeno okomito ravno, kao što je prikazano crvenim strelicama u nastavku. Primijenite lagani pritisak dok pričvršćujete lampicu na njezino mjesto.

Tijekom uklanjanja primijenite lagani pritisak izravno na donju stranu pomoću vašeg palca. Ne okretati vodoravno prema van.

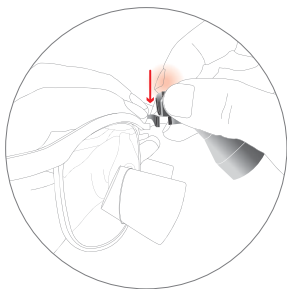

Spajanje lampice

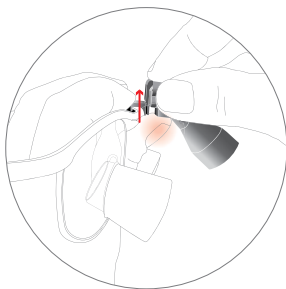

Odspajanje lampice

Upravljanje vašom Essential One jedinicom

Vrijeme rada

Vrijeme rada vaše baterije ovisi o intenzitetu svjetla, od 2 do 3,5 sata neprekidne uporabe.



Status punjenja baterije

Piskanje baterije označava da je potrebno punjenje.



Spojite podlogu za punjenje na punjač i stavite bateriju na podlogu.

Prosječno vrijeme punjenja prazne baterije je 1.5 sati.

■ Punjenje ■ Baterija je napunjena



Essential Alpha

Glavna kontrola
uključivanje/isključivanje
i intenzitet svjetla

Priključak za
punjenje

Indikator
punjenja baterije

LED priključak

Indikator razine
baterije



Upravljanje vašom svjetlom Essential Alpha

Uključivanje/
isključivanje
napajanja



Okrećite gumb za uključivanje i
isključivanje svjetla.


Mijenjanje
intenziteta
svjetla



Okrećite gumb za blago podešavanje
intenziteta svjetla.

Vrijeme rada

Najniže postavke omogućuju do 12 sata neprekidne uporabe, a najviše postavke približno 4 sati.

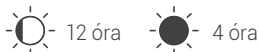

12 óra



4 óra

Status razine baterije

Indikator razine napajanja prikazat će preostalu razinu baterije.

■ ■ ■ ■ 25% napunjeno

■ ■ ■ ■ 50% napunjeno

■ ■ ■ ■ 75% napunjeno

■ ■ ■ ■ 100% napunjeno

Status punjenja baterije

■ Punjenje ■ Baterija je napunjena

Simboli i upute za pravilnu uporabu



Proizvođač

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Danska.
www.examvision.com



eFU Indicator

Pročitajte upute za uporabu

Digitalnu verziju na drugom jeziku možete preuzeti na sljedećoj poveznici:
examvision.com/support



Oprez. Pravilno koristite i održavajte

Nemojte promijeniti ili preinačiti vaš ExamVision proizvod. Izbjegavajte dodirivanje kućišta lampice tijekom duže uporabe na visokom intenzitetu jer može postati vruće. Nemojte izlagati proizvod iznimno vrućim, hladnim ili vlažnim uvjetima.

LED uređaji imaju vrlo snažno svjetlo, nemojte gledati izravno u svjetlo niti ga usmjeravati u oči drugih osoba. Koristite samo originalni isporučeni punjač. Drugi punjači mogu oštetiti proizvod.

Nemojte kratko spojiti vaš ExamVision proizvod.

Za optimalni vijek trajanja uvijek pažljivo rukujte vašim uređajima.

Ne pokušavajte sami popravljati vaš ExamVision proizvod. Ako se uređaj ošteti ili ne radi ispravno, zatražite pomoć od vašeg ExamVision distributera.

Briga i održavanje

Očistite mekom krpom i provjerite jesu li svi priključci i utori očišćeni od prašine.

Briga o bateriji

Baterija je djelomično napunjena od strane proizvođača. Najbolja praksa je održavati vašu baterijom napunjenom iznad 30 %. Djelomično punjenje neće oštetiti vašu bateriju.

Vijek trajanja baterije

Kada se vijek trajanja vaše baterije približava kraju, nakon približno 500 punjenja, primijetit ćete da je potrebno češće punjenje.

Otpornost na vodu

Vaše ExamVision svjetlo i kontrolna jedinica nisu izrađeni za uranjanje u vodu. Odmah očistite poprskanu vodu kako bi izbjegli oštećenje vaše jedinice.

Dezinfekcija

Koristite samo proizvode za dezinfekciju koji ne sadrže alkohol poput ExamVision dezinfekcijskih maramica (dostupno kod vašeg ExamVision distributera). NE koristite proizvode na bazi alkohola, ultrazvučne čistače, autoklaviranje ili druge vrste kemijske dezinfekcije. Vlažne maramice mogu uzrokovati kratki spoj baterije, ako su istovremenu u kontaktu s obje priključne točke. NE koristite metode UV dezinfekcije koje podižu razinu temperature lupe ili svjetla.

Izlaz punjača

PowerBand: DC 5V.2A.10W

Focus™ Xtend: DC 12V.1A.12W

Essential One: DC 5V.2.4A.12W

Essential Alpha: DC 5V.1A.5W



Držati suho



U blizini opreme označene ovim simbolom mogu nastati smetnje



Osjetljivo, pažljivo rukujte



Nemojte odlagati elektroničke proizvode zajedno s ostalim otpadom iz kućanstva



Nemojte koristiti ako je pakiranje oštećeno



 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

 linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com