

EXAMVISION™



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer  
Maßgeschneiderte Lupenbrille



## Inhalt

Einführung .....	3
<b>Qualitätskontrolle, Feinabstimmung und Videos</b>	
Galilean HD & Essential .....	4
Kepler Kompakt .....	6
Kepler Advanced .....	8
<b>Garantie .....</b>	<b>10</b>
<b>ExamVision-Lupenzubehör .....</b>	<b>11</b>
<b>Symbole und Anleitungen für eine korrekte Anwendung .....</b>	<b>14</b>



## Einführung

Sie haben sich für ein hochwertiges auf Ihre Maße abgestimmtes Präzisionswerkzeug entschieden. Wenn Ihre Lupenbrille angepasst werden muss, denken Sie bitte daran, dass es sich um ein komplexes Präzisionsinstrument handelt, für das Sie sorgfältig die Videoanleitung folgen müssen – oder bitten Sie Ihren ExamVision-Händler um Hilfe.

ExamVision kann den Arbeitsabstand Ihrer Lupenbrille anpassen und Korrekturgläser verbessern, wenn sich Ihr Sehvermögen im Laufe der Zeit verändert. Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an Ihren ExamVision-Händler.

Ihre Lupenbrille wurde sorgfältig und genau nach Ihren Anweisungen angefertigt und wir hoffen, dass Sie zu 100% zufrieden sind.



## Qualitätskontrolle, Feinabstimmung und Videos

---



### Galilean HD & Essential

Bevor Sie mit der Benutzung Ihrer neuen Lupenbrille anfangen, sehen Sie sich bitte vorher die ExamVision-Videos an, um eine **korrekte Anpassung und Sicht zu gewährleisten**. Wir haben Ihre Lupenbrille auf Ihren gewünschten Arbeitsabstand zwischen dem vorderen Augenbereich zu Ihrem Gegenstand eingestellt. Dieser Abstand steht auf der Qualitätskarte, die Ihrer Lupenbrille beiliegt.

Sehen Sie sich für eine optimale klare Sicht, Komfort und eine perfekte Passform unser Video **"Does your loupe fit correctly?"** an. Dies stellt die richtige Höhe und den richtigen Winkel der Lupenbrille sicher, so wie unten dargestellt:



---

### Videos

Sie finden ExamVision-Videos auf unserem Kanal auf YouTube und Vimeo. Um sich die Videos jetzt anzuschauen, scannen Sie einfach den QR-Code hier:





## Qualitätskontrolle, Feinabstimmung und Videos


---



### Kepler Kompakt

Bevor Sie mit der Benutzung Ihrer neuen Lupenbrille anfangen, sehen Sie sich bitte vorher die ExamVision-Videos an, um eine **korrekte Anpassung und Sicht zu gewährleisten**. Wir haben Ihre Lupenbrille auf Ihren gewünschten Arbeitsabstand zwischen dem vorderen Augenbereich zu Ihrem Gegenstand eingestellt. Dieser Abstand steht auf der Qualitätskarte, die Ihrer Lupenbrille beiliegt.

Sie müssen Ihren Kepler Kompakt in Ihrem Arbeitsabstand für ein Auge nach dem anderen feineinstellen. Fixieren Sie Ihre optimale Feineinstellung mit dem beiliegenden Inbusschlüssel. Sehen Sie sich für eine optimale klare Sicht, Komfort und perfekte Passform unser Video **“Fitting your Kepler Kompakt loupe”** an. Dies stellt die richtige Höhe und den richtigen Winkel der Lupenbrille sicher, so wie unten dargestellt:

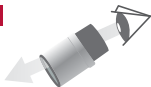

---

### Videos

Sie finden ExamVision-Videos auf unserem Kanal auf YouTube und Vimeo. Um sich die Videos jetzt anzuschauen, scannen Sie einfach den QR-Code hier:







## Qualitätskontrolle, Feinabstimmung und Videos

---



### Kepler Advanced

Bevor Sie mit der Benutzung Ihrer neuen Lupenbrille anfangen, sehen Sie sich bitte vorher die ExamVision-Videos an, um eine **korrekte Anpassung und Sicht zu gewährleisten**. Wir haben Ihre Lupenbrille auf Ihren gewünschten Arbeitsabstand zwischen dem vorderen Augenbereich zu Ihrem Gegenstand eingestellt. Dieser Abstand steht auf der Qualitätskarte, die Ihrer Lupenbrille beiliegt.

Sie müssen mit Ihren Kepler Advanced Ihren Arbeitsabstand für ein Auge nach dem anderen feineinstellen. Sehen Sie sich für eine optimale klare Sicht, Komfort und perfekte Passform unser Video ***"Fitting your Kepler Advanced loupes"*** an. Dies stellt die richtige Höhe und den richtigen Winkel der Lupenbrille sicher, so wie unten dargestellt:



---

### Videos

Sie finden ExamVision-Videos auf unserem Kanal auf YouTube und Vimeo. Um sich die Videos jetzt anzuschauen, scannen Sie einfach den QR-Code hier:



## Garantie

---

### 5 Jahre Herstellergarantie

- Galilean HD
- Kepler Kompakt
- Kepler Advanced
- Essential

Beachten Sie bitte, dass unsere Garantie keine Mängel abdeckt, die durch normale Abnutzung, Missbrauch, Nachlässigkeit, versehentliche Beschädigung, Modifikation, nicht in Originalverpackung vorgenommenem Versand oder Fehlern aufgrund von unsachgemäßen Montage-, Wartungs-, Service- oder Reinigungsverfahren entstehen.

Im Falle einer Fehlfunktion senden Sie das Gerät bitte zur Reparatur an Ihren ExamVision-Händler.

Siehe auch: [examvision.com/warranty](http://examvision.com/warranty)



## ExamVision-Lupenzubehör

---



### Nasenpolster

Durchsichtige Silikon-Nasenpolster in verschiedenen Größen.



### Nackenband

Feines aber trotzdem strapazierfähiges Band für zusätzliche Sicherheit beim Tragen Ihrer Lupenbrille – mit Silikonaufsätzen.



### Kabelclips

Befestigen Sie die Kabelclips an den Bügeln Ihrer Lupenbrille und schieben Sie Ihr LED-Kabel vorsichtig in den Clip.



### Reinigungslösung (alkoholfrei)

Unsere benutzerdefinierte Reinigungslösung hält Ihre Lupenbrille in perfektem Zustand. Verwenden Sie eine kleine Menge auf einem Mikrofaser-Reinigungstuch, um Schmutz, Staub und Fett sicher zu entfernen.

## ExamVision-Lupenzubehör

---



### Desinfektionstücher (alkoholfrei)

Unsere Desinfektionstücher halten Ihre Lupenbrille in perfektem Zustand. Diese Einweg-Reinigungstücher sind eine schnelle und einfache Möglichkeit, Schmutz, Staub und Fett sicher zu entfernen.



### Visionshield (Größe L, XL und MAX)

Schützt die Lupenbrille und Ihr Gesicht vor Spritzern und Schmutz. Einfach mit einem Klett-Adapter an ExamVision-Lupenbrillen zu befestigen. Größe L passt zu Galilean HD- und Essential-Lupenbrillen – und Größe XL passt zu Kepler-Lupenbrillen. Diese Versionen haben eine Aussparung für eine Stirnlampe im Visier.

Das Visionshield MAX ist ein Vollgesichtsvisier, das im Rahmen Ihrer Arbeitsroutine einfach an jeder ExamVision-Lupenbrille angebracht werden kann.

ExamVision Visionshields bestehen aus einer splitterfreien, flexiblen Kunststoffolie, die leicht gereinigt, desinfiziert und wiederverwendet werden kann.



### Sideshields

Nahezu unsichtbare, federleichte Seitenschilder schützen die Augen vor Spritzern und Schmutz. Einwegartikel, in Packungen à drei Paaren.



### Juwelen

Wenn eine vollständige Anpassung nicht ausreicht, warum nicht einen Diamanten hinzufügen? Ein Diamant mit 0,02 Karat (1,7 mm), eingebettet in einen von einem dänischen Schmuckdesigner handgefertigten Stecker aus Sterlingsilber, um Ihren schönen Icon-Rahmen aufzuwerten. Rubine und Saphire sind ebenfalls erhältlich. Wir perfektionieren es. Sie personalisieren es.



### Farbige Bügelspitzen

Antiallergische Bügelspitzen zur Personalisierung und für eine komfortable Passform. Aus Kunstgummi hergestellt. In einer großen Auswahl an Farben erhältlich.

Die vollständige Liste des verfügbaren Zubehörs sehen Sie auf: [examvision.com/loupes-lights/accessories/](https://examvision.com/loupes-lights/accessories/)



## Symbole und Anleitungen für eine korrekte Anwendung

---



### Hersteller

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Dänemark.  
[www.examvision.com](http://www.examvision.com)



eRFU indicator

### Gebrauchsanweisung beachten

Für digitale Versionen in verschiedenen Sprachen folgen Sie bitte diesem Link: [examvision.com/support](http://examvision.com/support)



### Achtung. Richtige Anwendung und Wartung

Ihre ExamVision-Lupenbrille ist ein Präzisionsinstrument. Wie bei jedem Qualitätsprodukt ist die richtige Pflege erforderlich, um Ihre Lupenbrille in einem Topzustand zu halten. Bei normaler täglicher Anwendung muss Ihre Lupenbrille von Zeit zu Zeit gewartet werden. Prüfen Sie die Lupenbrille regelmäßig. Wenn Sie Verschleiß oder Schäden bemerken, Ihre Lupenbrille sich locker anfühlt oder nicht mehr so gut sitzt wie im Neuzustand, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich sofort an Ihren ExamVision-Händler, um Service und Ersatzteile zu erhalten. Ihr Optiker vor Ort kann Ihnen möglicherweise bei kleinen Anpassungen oder dem Festziehen von Schrauben behilflich sein. Modifizieren oder verändern Sie Ihre Lupenbrille NICHT.

### Allergien

ExamVision verwendet ausschließlich hochwertige, allergiegetestete Brillenmaterialien. Ihre Lupenbrille muss so angepasst sein, dass nur das Nasenpolster und die Bügelenden Ihre Haut berühren. Im höchst unwahrscheinlichen Fall einer Reizung wenden Sie sich an Ihren ExamVision-Händler.

### **Pflege und Reinigung**

Verwenden Sie **KEIN** Alkohol zur Reinigung. Verwenden Sie nur von ExamVision empfohlene alkoholfreie Reinigungs- und Desinfektionsprodukte und ein weiches, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie **KEINE** autoklavierenden oder Ultraschallreinigungsmethoden. Verwenden Sie **KEINE** immersiven UV-Desinfektionsmethoden.



#### **Von Sonnenlicht fernhalten**

Setzen Sie Lupenläser nicht direkt der Sonne aus. Durch die Vergrößerung kann ein „Hotspot“ entstehen, der einen Brand verursachen kann.



#### **Trocken halten**



#### **Zerbrechlich, vorsichtig behandeln**



#### **Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist**



 [facebook.com/ExamVisionDK](https://facebook.com/ExamVisionDK)

 [instagram.com/examvision/](https://instagram.com/examvision/)

 [linkedin.com/company/examvision-aps](https://linkedin.com/company/examvision-aps)

[www.examvision.com](https://www.examvision.com)